


シルフィード (SYB-100) 用

# 洗浄台

SNW-100

## 取扱説明書

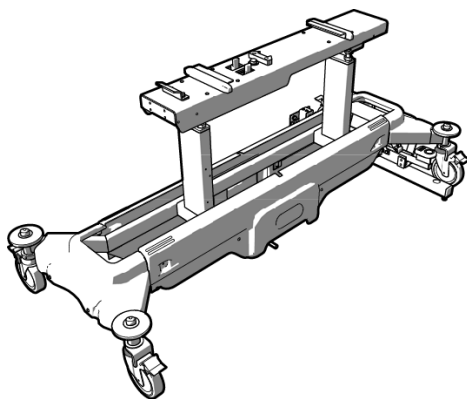

ご使用になる前に .....	2
安全上のご注意 .....	2
各部の名称 .....	5
始業点検について .....	6
組み合わせ .....	8
操作方法 .....	9
横移動する .....	9
担架スライド防止装置について .....	9
キャスター .....	10
着衣ベッド (別売り) を連結 .....	11
着衣ベッド (別売り) を切り離す .....	13
日常のお手入れ .....	15
清掃 .....	15
このようなときは .....	16
機器について .....	17
保守・点検 .....	17
保証とアフターサービス .....	17
仕様 .....	19

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」は
  - ・ 1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
  - ・ 1部を保存用として、大切に保管してください。

## 用 途

本製品は、弊社浴槽『シルフィード』(SYB-100)専用の洗浄台です。浴槽、担架と組み合わせて、入浴作業を安全に効率よく行うことができます。

## 特 長

### ●洗身や入浴中の介助が容易

ガイドレールにより、入浴の際は浴槽に容易に連結でき、洗身や移乗の際は浴槽から630mm移動して離すことで、容易に介助ができます。

### ●浴槽に接近しやすい形状

洗浄台の中央部は、上部も足元も浴槽に接近しやすいようにスペースを取った構造です。担架を浴槽⇄洗浄台へ移動する際の腰への負担を軽減します。

### ●担架スライド防止装置を搭載

浴槽に連結しないと担架の移動ができない安全設計です。

# ご使用になる前に

## 安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

### 表示について

危険や損害の程度を以下に区分し、表示しています。



#### 危険

取り扱いを誤ると、  
「死亡または重傷を負うことに至る」  
ことを示しています。



#### 警告

取り扱いを誤ると、  
「死亡または重傷を負う可能性が想定される」  
ことを示しています。



#### 注意

取り扱いを誤ると、  
「傷害または物的損害の発生が想定される」  
ことを示しています。

### 絵表示の意味



#### 禁止

行為を禁止することを示した表示です。



#### 強制

必ず実行していただくことを示した表示です。

### その他の表示

#### お願い

製品を使用する上で留意していただくことを  
示した表示です。


#### 参考


参考にしていただくことを示した表示です。

## ご使用になる前に／安全上のご注意



### 横移動・浴槽との連結

#### 警告

-  以下のときはキャスターを必ずロックする
- ・洗淨台に載った担架上で、介助作業（移乗、洗身、洗髪等）をするとき
  - ・洗淨台を横移動した後
  - ・担架を移動（スライド）するとき
- ロックをしていないと、洗淨台が不安定となり、事故の原因になります。

-  洗淨台を浴槽へ連結した後、連結完了ランプの点灯を確認
- 連結が不十分だと、担架を移動する際に落下する恐れがあります。

#### 注意

-  ゆっくり静かに洗淨台を移動する
- 入浴者に恐怖感やショックを与えないようにし、またけが等が発生させないように入浴者の状態と周囲の状況に十分注意して移動してください。
-  解除ペダルには無理な荷重をかけない
- ペダルのフレームが変形したり破損したりする恐れがあります。

### その他

#### 注意

-  次亜塩素酸ナトリウムを洗淨台に直接かけない
- 脱色、変色、破損の原因になる恐れがあります。

## ご使用になる前に／安全上のご注意

### 着衣ベッド（別売り）との連結・移乗

#### 警告



#### 連結後はキャスターを必ずロック

ロックをしていないと、移乗の際に洗浄台や着衣ベッドが動き出し、事故の原因になります。



#### 洗浄台と着衣ベッドの連結を確認

連結が不十分だと、移乗の際に洗浄台と着衣ベッドが離れ、入浴者が落下する恐れがあります。

#### 注意




#### ゆっくり静かに着衣ベッドを洗浄台に連結する

入浴者に恐怖感やショックを与えないようにし、またけが等が発生させないように入浴者の状態と周囲の状況に十分注意して移動してください。

# ご使用になる前に

## 各部の名称

### 洗浄台 (SNW-100)

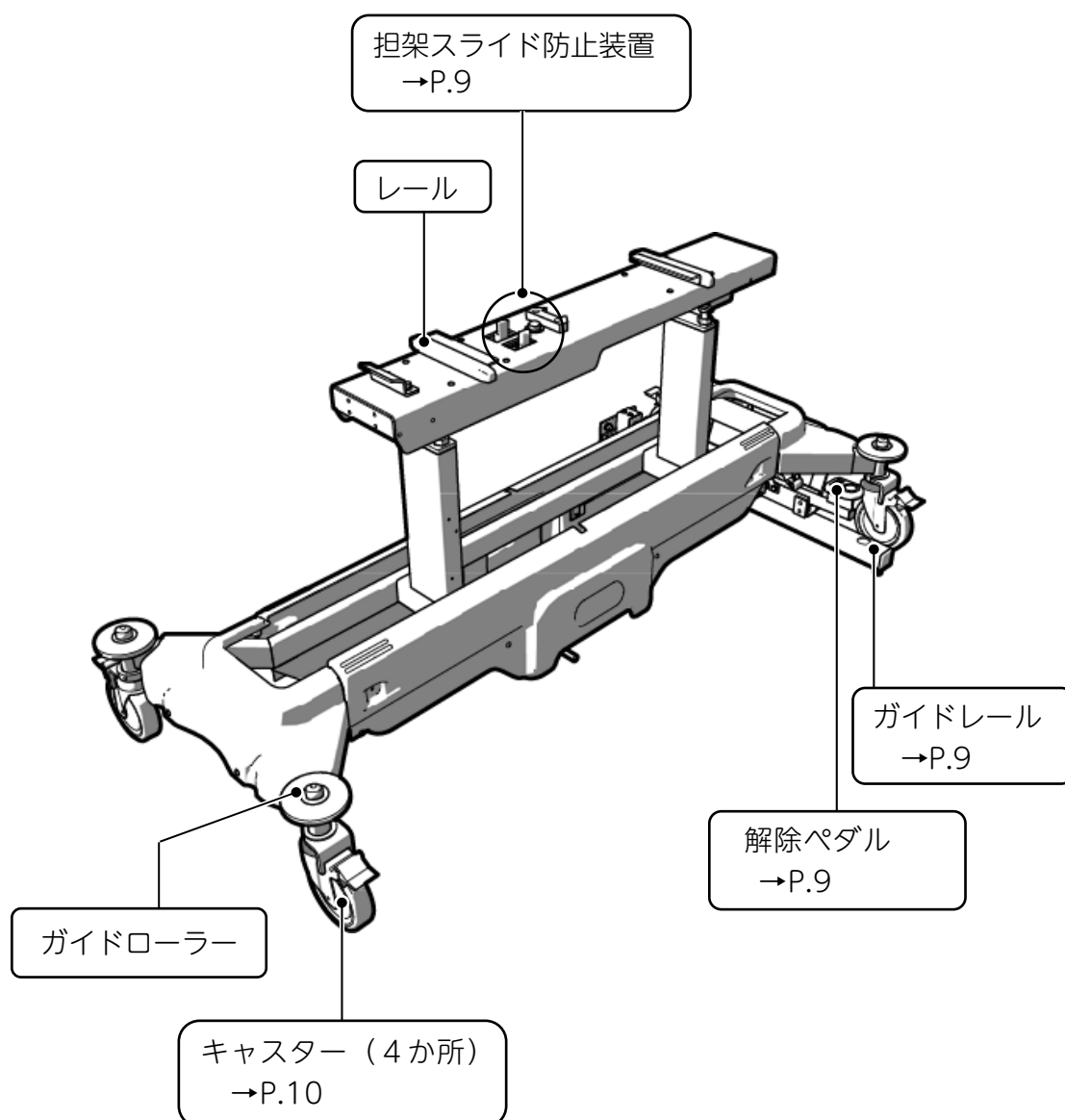


# ご使用になる前に

## 始業点検について

ご使用前に下記の始業点検項目に基づき、始業点検を実施してください。

①周囲に障害物はありませんか？

③担架スライド防止装置は作動しますか？

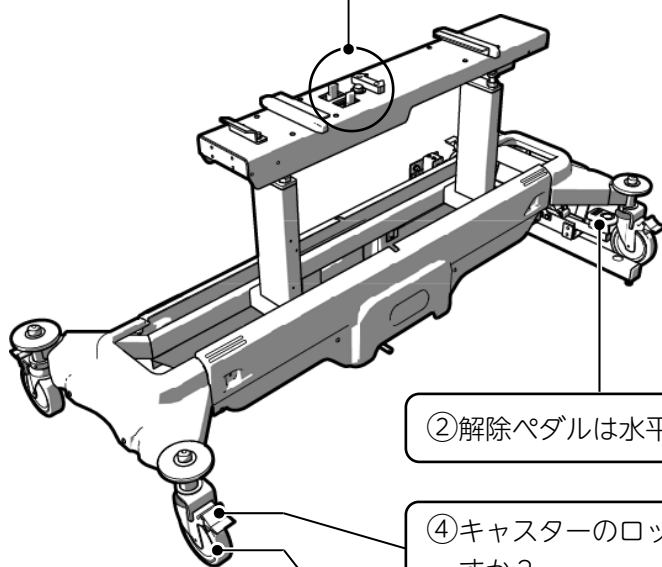

②解除ペダルは水平に戻りますか？

④キャスターのロックは確実にできますか？

⑤キャスターの緩み、ガタつき、抜け出しはありませんか？

⑥キャスターの車輪の摩耗はありませんか？

⑦横移動後に洗浄台は確実に固定しますか？

点検の際は、本ページをコピーしてご使用ください。

始業点検チェックリスト：

シルフィード用洗浄台（SNW-100）

点検日 年 月 日

項目	点検内容	点検方法	チェック	備考
①	障害物の有無	目視	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	
②	解除ペダルの作動	解除ペダルを踏んで戻し、ペダル上面がほぼ水平になるかどうかを確認	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	
③	担架スライド防止装置	浴槽に連結させない状態で担架移動レバーを引き、担架が少し移動して止まることを確認 確認後、レバーから手を離し、担架を元の位置に戻し、押し引きしてロックを確認	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	
④	キャスターのロック作動	キャスターロックペダルを踏んでキャスターの車輪固定を確認	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	(P.10 参照)
⑤	キャスターの緩み、ガタつき、抜け出し	目視および触って確認	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	
⑥	キャスターの車輪の摩耗	目視	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	
⑦	横移動後の洗浄台の固定	目視	<input type="checkbox"/> OK・ <input type="checkbox"/> NG	

これ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになっていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所までご連絡ください。  
故障した場合は故障した機器を誤って使用しないように、周囲の方が分かるように表示（故障中の貼り紙等）してください。



# ご使用になる前に

## 組み合わせ

本製品は、弊社浴槽『シルフィード』専用の洗浄台です。

必ず専用の浴槽・担架・着衣ベッドと組み合わせてご使用ください。

## 周辺装置(別売り)

浴槽（シルフィード）	・・・SYB-100C、R、L
担架（スライド式枕タイプ）	・・・SWS-100
担架（バスクッションピロータイプ）	・・・SWS-105
着衣ベッド	・・・STY-100

操作方法については、各々の取扱説明書をご覧ください。


浴槽との連結・分離操作に関連する事項は、浴槽の取扱説明書「入出浴作業」をご覧ください。

# 操作方法

## 横移動する

洗浄台の移動は、解除ペダルを踏みます。

ガイドレールに沿って浴槽との間を 630mm 横移動します。

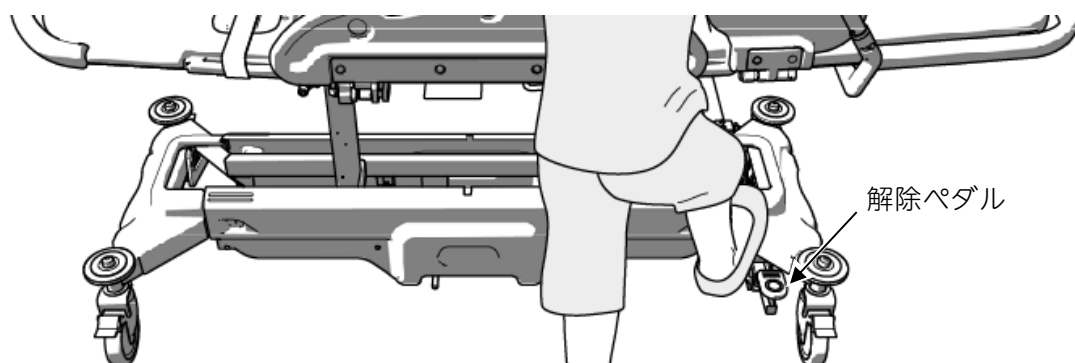

## 浴槽との連結および分離

浴槽との連結、分離操作につきましては、浴槽 (SYB-100) の取扱説明書「入出浴作業 洗浄台を浴槽へ連結する」および「洗浄台を分離する」をご覧ください。

## 担架スライド防止装置について

担架スライド防止装置とは、担架の落下を防止するための機能です。

以下の機構的な制限をすることで、誤操作や意図しない動きを防止し、安全性を高めています。


- ・洗浄台を浴槽から離れた状態で、担架を移動（スライド）させることはできません。
- ・浴槽と連結している方向のみ移動（スライド）させることができます。

# 操作方法

## キャスター


キャスターロックペダルを踏んでロックします。  
4 輪それぞれ個別にロックが付いています。

キャスター解除レバー  
キャスターロックペダル

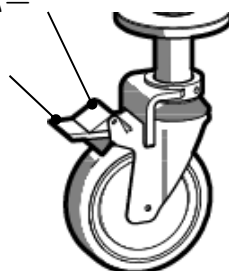

## ロック

キャスターロックペダルをそれぞれ踏みます。

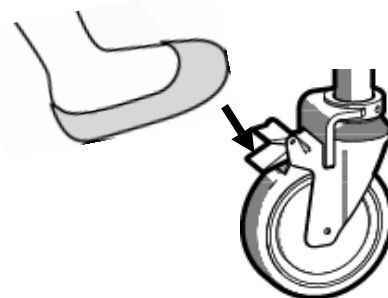

**警告**


以下のときは、キャスターを必ずロックする

- ・洗淨台に載った担架上で介助作業（移乗、洗身、洗髪等）をするとき
- ・洗淨台を移動した後
- ・担架を移動（スライド）するとき
- ・着衣ベッドを連結・分離するとき※

※着衣ベッド（別売り）をご使用の場合のみ

## 解除

キャスター解除レバーをそれぞれ踏みます。

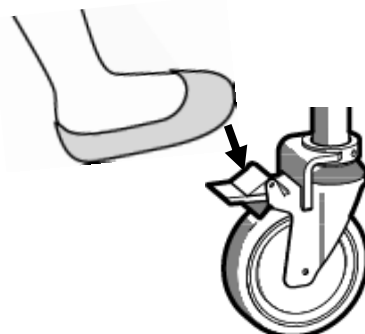


# 操作方法

## 着衣ベッド(別売り)を連結

- 1 着衣ベッドの高さを、相手側に合うように調整します。


### 参考

入浴者を真横に滑らせて移乗する場合は、移す先の高さをわずかに低く調節しておく、容易に行えます。

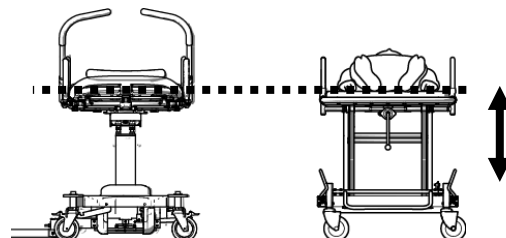


- 2 着衣ベッドの連結部を下ろします。

**⚠ 注意** 連結部に無理な力をかけない

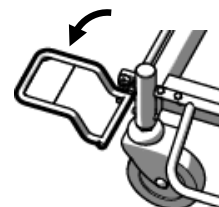

- 3 洗浄台を横移動方向にロックし、洗浄台のキャスター4輪全てをロックします。


**⚠ 警告** ・洗浄台の横移動ロックを確認  
・キャスターを必ずロック

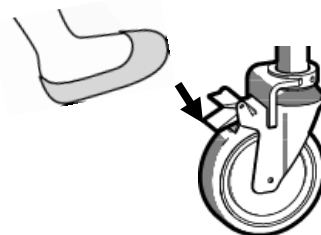

- 4 着衣ベッドと担架の連結側のサイドフェンスを倒します。

・サイドフェンスは、連結する直前でサイドフェンスが倒せる程度の距離に近づいたときに倒してください。


・サイドフェンスの操作方法については、担架と着衣ベッドの取扱説明書を参照してください。

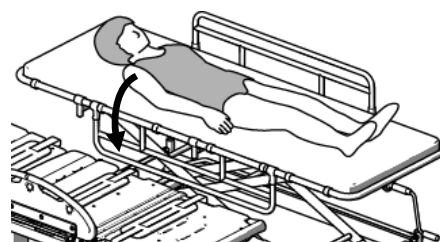


**⚠ 警告** サイドフェンスを倒した状態で着衣ベッドを動かす際は、入浴者が落ちないように注意

## 操作方法/着衣ベッドを連結

- 5** 担架と着衣ベッドの位置合わせマークが合うように、着衣ベッドを押し付けます。

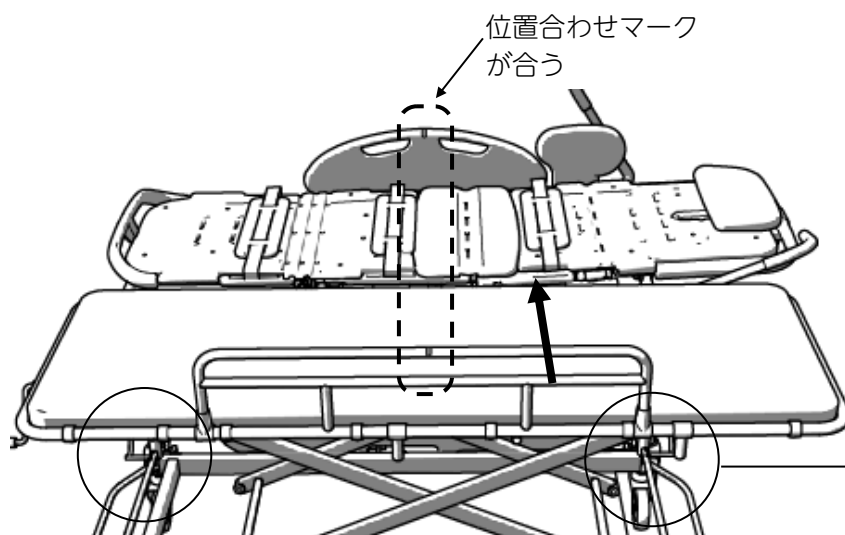

・2か所のガイドローラー部が着衣ベッドの連結部と連結します。

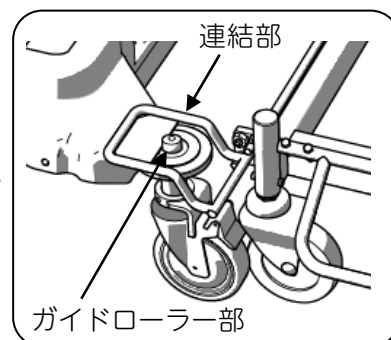


**警告** 着衣ベッドと洗浄台の間に入浴者の手足の挟み込みに注意

**注意** 連結の際は、着衣ベッドをできるだけ水平に押す

- 6** 連結を確認し、着衣ベッドのキャスターをロックします。

**警告** ・洗浄台と着衣ベッドの連結を確認  
・連結後はキャスターを必ずロック

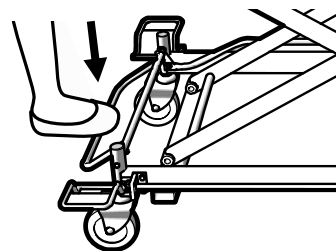


# 操作方法


## 着衣ベッド(別売り)を切り離す

- 1 洗浄台のキャスター4 輪全てをロックします。


**⚠ 警告** ・洗浄台のロックを確認  
・キャスターを必ずロック

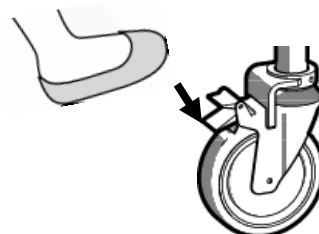


- 2 着衣ベッドのキャスターロックを解除します。

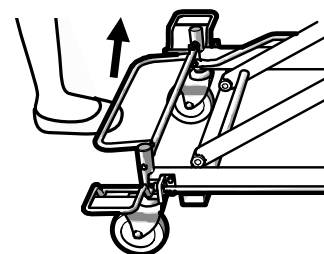

- 3 着衣ベッドの連結部を跳ね上げ、着衣ベッドを洗浄台から引いて離します。

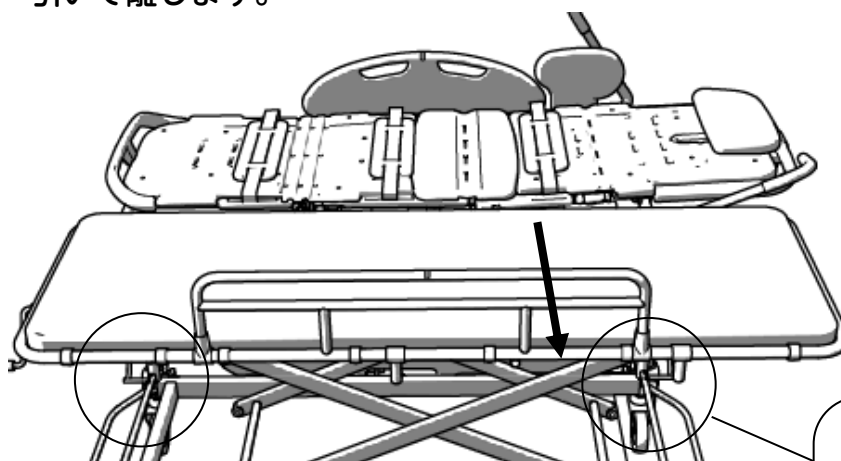


連結部

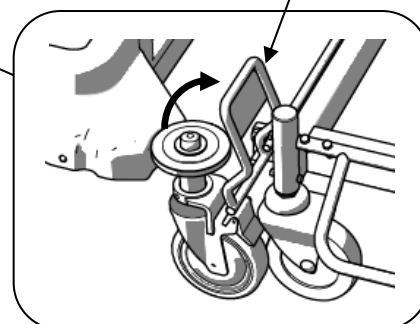

**⚠ 警告** サイドフェンスを倒した状態で着衣ベッドを動かす際は、  
入浴者が落ちないように注意

## 操作方法/着衣ベッドを切り離す



- 4** 切り離したら、すぐに着衣ベッドのサイドフェンスを起こします。  
(入浴者が乗っている場合)

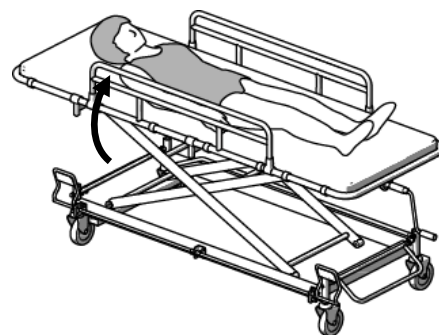

# 日常のお手入れ


## 清掃

下記の方法で清掃してください。

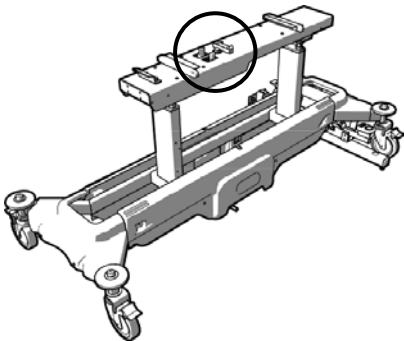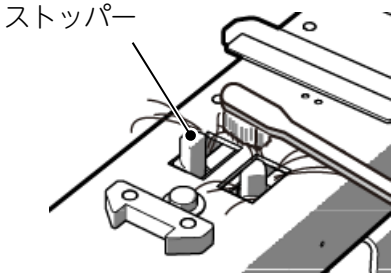部品名	清掃方法
フレーム部 (ステンレス部)	ステンレス部は水滴をそのままにしておくと水垢が残り汚くなります。 乾いた布で水滴を拭いてください。
カバー部	乾いた布で水滴を拭いてください。
担架スライド防止装置	ストッパー部に髪の毛等のゴミが絡まっていた場合は、歯ブラシ等できれいに 取り除いてください。  

## 参考

洗浄台についている安全装置（担架検知装置）により、担架が洗浄台上にないときは浴槽から分離できません。分離して清掃したい場合は、ストッパー部にあるボタンを押しながら引き離すことで分離できます。清掃後に連結するときは同様にボタンを押しながら浴槽に押し付けて連結します。清掃後は必ず浴槽に連結してください。

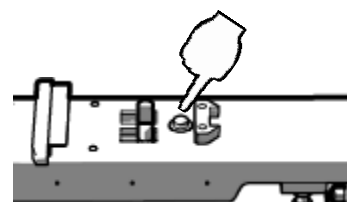



# このようなときは

まずは次の内容を確認していただき、なお異常があるときは最寄りの営業所までご連絡ください。

このようなときは	ここを確認してください	参照ページ
キャスター	● <u>異物を挟み込んでいませんか？</u> →異物が無いかを確認し、解消できない場合は最寄りの営業所までご連絡ください。	P.10
	● <u>キャスターがロックされていませんか？</u> →全てのキャスター解除レバーを踏み、キャスターのロックを解除してください。	P.10
	● <u>キャスターを確実にロックしていますか？</u> →全てのキャスターロックペダルを最後まで踏んで、キャスターをロックしてください。	P.10
	● <u>ガイドレールに確実に固定されていますか？</u> →解除ペダルを踏みなおし、確実に固定してください。	P.9
横移動	● <u>異物を挟み込んでいませんか？</u> →異物が無いかを確認し、解消できない場合は最寄りの営業所までご連絡ください。	P.9
着衣ベッド(別売り)との連結・分離	● <u>着衣ベッドの押し込みは足りていますか？</u> →着衣ベッドを最後まで洗浄台に押し付けてください。	P.12
	● <u>着衣ベッド位置は合っていますか？</u> →担架の位置合わせマークと着衣ベッドの位置合わせマークが並ぶように、連結してください。	P.12
	● <u>着衣ベッドの連結部が跳ね上がっていますか？</u> →連結部を跳ね上げてください。	P.13

- ・その他、ご不明な点につきましては最寄りの営業所までご相談ください。
- ・ご使用中万一故障が発生したら、ただちに入浴者を安全な場所に退避させた後、使用を中止して最寄りの営業所までご連絡ください。

# 機器について

## 保守・点検

- ・ 本製品を使用する際は、機器の管理者の方が P.6～7 の点検項目に基づき、必ず始業点検（日常点検）を実施してください。
- ・ 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
- ・ 点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- ・ 清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

### ● 定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めいたします。詳しくは別添の「保守点検契約のお勧め」をご覧ください。  
最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書と保証期間

- ・ 保証書（別添）は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。  
保証書がないと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- ・ 保証期間は 1 年です。但し本体フレームは 5 年間です。保証の規定につきましては保証書をご覧ください。

### 修理をご依頼いただく場合

- ・ 修理をご依頼いただく場合は、下記のことをお知らせください。  
機種名    :   SNW-100  
お買い上げ:    年   月   日  
故障状況(できるだけ詳細に)  
住所、氏名、電話番号
- ・ メーカーより指示のあるとき以外は、機器を分解しないでください。


# 機器について

## 耐用期間

10 年：保守点検などの弊社推奨環境で使用された場合

## 損耗品（使用により、摩耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- ・ 正常な使用において、交換の目安が**約 3 年**のもの。

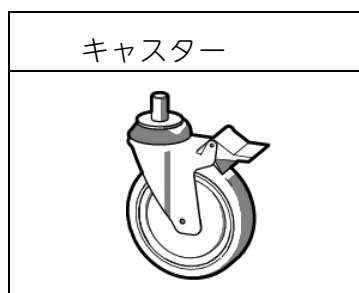

損耗品の交換時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

## 保守用性能部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合があります。

# 機器について

## 仕様

名 称		洗浄台
型 式		SNW-100
外形寸法	浴槽連結時	長さ 1550×幅 771×高さ 686 mm
	分離時	長さ 1550×幅 1401×高さ 686 mm
質 量		約 40 kg
最大使用者体重		100 kg
材質	フレーム	ステンレス（一部塗装仕上げ）
	カバー	プラスチック(ABS)
機能構成		浴槽接続ガイドレール ストローク：630mm 担架スライド防止装置 担架検知装置 キャスター：φ125mm、個別ロック付き

注．都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。